



\*不包括平板电脑

即将推出!

# 数字式密度计

## DA-860 / DA-850 / DA-840

可靠


方便

效率

日本京都电子(KEM)自1978年推出第一代振动法密度计「DA-101B」,历经42年后,即将推出第六代密度计「DA-800」系列。此系列继承了制造厂商悠久的制造工艺和技术,并配备了满足市场需求的新功能。

可选的前面板!!

可从右侧4种类型中选择

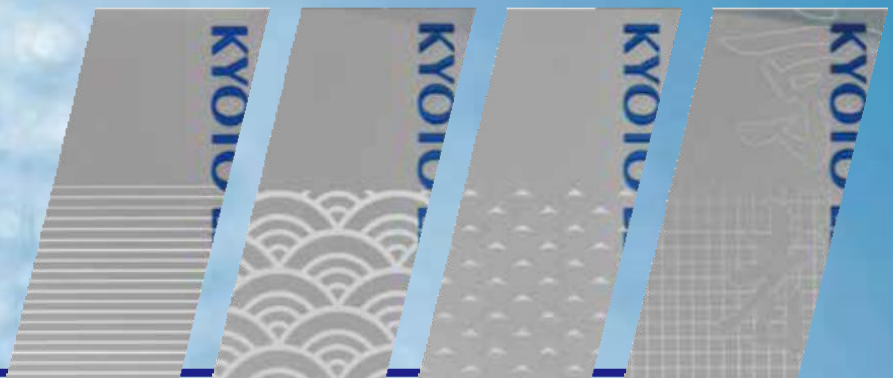

# 数字式密度计

## DA-860 / DA-850 / DA-840

标配DI支持功能	可以进行 多通道同时测量	独立的操作单元 可以遥控	配备摄像设备 提高测量池可见度
----------	-----------------	-----------------	--------------------

型号		DA-860 (6位数)	DA-850 (5位数)	DA-840 (4位数)
测量方式		振动周期测量方式		
测量范围		0 ~ 3g/cm <sup>3</sup>		
设定温度范围		0 ~ 100°C		
重复性	密度	SD 0.000001g/cm <sup>3</sup>	SD 0.00001g/cm <sup>3</sup>	SD 0.00005g/cm <sup>3</sup>
分辨率	密度	0.000001g/cm <sup>3</sup>	0.00001 g/cm <sup>3</sup>	0.0001g/cm <sup>3</sup>
	温度	0.001°C	0.01°C	0.01°C
最小样品量		手动进样: 约1.0mL、自动进样: 约2.0mL		

\* 规格如有更改, 恕不另行通知

## 即将推出 多样品自动进样器 AS-8030



\*不包括平板电脑

采进样加压方式,  
抑制气泡产生

与密度计主机组成,  
可节省空间

选择各种取样方式,  
和多种清洗方法

对昂贵的样品,  
具有样品回收功能

型号	AS-8030 多样品自动进样器
样品数量	30个
规格	标准
设定温度	标准规格: 室温
样品量	30个: 20[mL] 玻璃瓶
最小样品量	10 [mL]
样品转移方式	通过转盘移动样品瓶
取样方式	(1) 加压取样 (2) 样品可回收至样品瓶

\* 规格如有更改, 恕不另行通知

**KEM 京都電子工業株式会社**

**KYOTO ELECTRONICS**  
MANUFACTURING CO.,LTD.

<http://www.kyoto-kem.com>



为了安全使用

- 使用前请仔细阅读使用说明书, 以确保正确使用。  
请使用正确的电源和电压。

京都电子工业株式会社(KEM)-中国分公司  
可睦电子(上海)商贸有限公司(KEM China)  
上海徐汇区宜山路333号汇鑫国际大厦1201室  
服务热线: 400-820-2557  
TEL: 021-54488867 FAX: 021-54480010  
E-mail: kemu-kem@163.com  
<http://www.kem-china.com>